



PINCHA AQUÍ
JIG DE LUCIA



Las férulas de descarga se diseñan a medida de cada paciente de forma totalmente personalizada. Son fabricadas a través del flujo digital utilizando la tecnología más avanzada. La experiencia en digitalización de nuestro laboratorio hace que los resultados sean precisos, rápidos y exclusivos.

Las principales características de las férulas son las siguientes:

- Elaboradas 100% a través de flujo digital, asegurando una mayor precisión.
- Al realizarse de forma completamente personalizada consiguen un ajuste perfecto
- El diseño digital permite reducir los tiempos de trabajo y las visitas necesarias del paciente a clínica.
- Su flexibilidad, ligereza y termo adaptabilidad hacen que resulten muy cómodas para el paciente, pudiendo readaptarlas, en caso necesario, **sumergiéndolas en agua caliente unos minutos y dejando que endurezcan en boca.**
- Son biocompatibles, por lo que nos producen ningún tipo de reacción alérgica.
- Son el mejor tratamiento contra el bruxismo y los problemas de la articulación temporomandibular



LINEA ANALÓGICA



1

IMPRESION SUP E INF
CONVENCIONAL EN
ALGINATO Y VACIADO
EN CLÍNICA



2

MORDIDA CONSTRUCTIVA
EN RELACIÓN CÉNTRICA
MEDIANTE JIG DE LUCÍA.
SOLICÍTANOSLO



3

REGISTRO DE MORDIDA
CON ELASTÓMERO EN
LA MISMA SITUACIÓN
QUE DETERMINA EL
JIG DE LUCÍA



4

ENVÍO DE MODELOS JUNTO
A LA MORDIDA AL
LABORATORIO Y REALIZAR
PEDIDO A TRAVÉS DE VEVI

LINEA DIGITAL



1

IMPRESION SUP E
INF INTRAORAL




2

MORDIDA CONSTRUCTIVA EN
RELACIÓN CÉNTRICA
MEDIANTE JIG DE LUCÍA.



3

TOMA DE REGISTRROS
DIGITALES EN RELACIÓN
CENTRICA Y REGISTROS
EN OCLUSIÓN DINÁMICA.

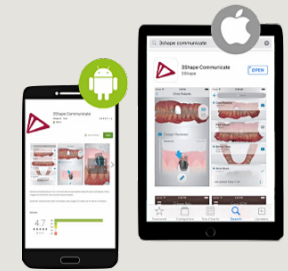

4

REALIZAR PEDIDO EN
VEVI Y ADJUNTAR TODOS
LOS DATOS Y ARCHIVOS