

PROTOCOLO FOTOGRÁFICO

¿Qué es?

El protocolo fotográfico es una secuencia de fotos de la cara del paciente que permite al laboratorio poder trabajar con la máxima información gráfica, valorando desde nuestra experiencia aquellos cambios que veamos necesarios.

¿Para qué sirve?

El laboratorio va a utilizar estas imágenes para integrarlas al diseño digital. Por lo tanto forma parte de la base de datos del paciente que todo laboratorio debería poseer, para obtener los mejores resultados.

“UNA IMAGEN VALE MÁS QUE MIL PALABRAS”

¿Qué hacemos con ellas?

Al incorporar estas imágenes enviadas del paciente (ficheros 2D) al software de diseño, podremos solaparlas con los ficheros 3d de los escaneados. De esta manera el diseño que se vaya realizando se podrá visualizar sobre la cara del paciente. Podríamos decir que eso nos permite poder diseñar como si tuviéramos el paciente dentro del software.

Así podemos observar los pasillos posteriores (corredores bucales), situar la línea media, ver la exposición dentaria, posicionar los planos horizontales evitando cantings respecto a la línea bipupilar, etc etc

NECESITAMOS

- **FOTO FRONTAL:** en reposo, sonrisa, amplia sonrisa **SIN ABREBOCAS**
- **FOTO LATERAL:** a 45° y 90° de ambos lados en reposo y sonrisa **SIN ABREBOCAS**
- **FOTO DE OCLUSAL:** donde se aprecie el arco vestibular y soporte labial. También es muy útil hacerla con el paciente en el sillón dental desde arriba para ver el vestíbulo.
- **FOTOS INTRAORALES DE LA OCLUSIÓN :** tanto frontales como laterales **CON ABREBOCAS**




:: SocioDental
by AIVORIQ


Evita los Errores comunes en la siguiente página

PROTOCOLO FOTOGRÁFICO

Errores comunes

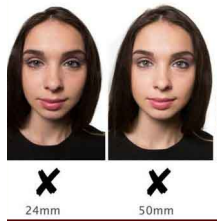

ERROR	PROVOCA	SOLUCIÓN
MALA COLOCACIÓN DEL ABREBOCAS	VISUALMENTE GENERA ERRORES EN EL ALINEADO DE LOS DISEÑOS	COMPROBAR QUE LA COLOCACIÓN DEL ABREBOCAS ESTÉ CENTRADO
HACER LA FOTO EXTRAORAL MUY CERCA DE LA CARA DEL PACIENTE	DISTORSIONA LA IMAGEN GENERANDO ERRORES EN LA INTEGRACIÓN FACIAL EN LOS DISEÑOS	HACER LA FOTO A 1,5M DEL PACIENTE Y USANDO EL ZOOM PARA ACERCAR LA IMAGEN
CABEZA GIRADA	NO SE PUEDE DEFINIR LINEAS MEDIAS, PLANOS HORIZONTALES, ETC	EN LA FOTO FRONTAL, DESPEJAR ZONA DE LAS OREJAS Y COMPROBAR QUE SE VEN EL MISMO TAMAÑO EN LAS DOS.
CABEZA DOBLADA	NO SE PUEDE DEFINIR LINEAS MEDIAS, PLANOS HORIZONTALES, ETC	INTENTAR CENTRAR LA CABEZA CONSIGUIENDO ALINEAR LAS PUPILAS AL PLANO HORIZONTAL.
EXTRAORALES SENTADOS EN EL SILLÓN	NO SE PUEDE VALORAR PORQUE GENERALMENTE CUMPLEN TODOS LOS ERRORES ANTERIORES	LEVANTAR AL PACIENTE, HACIENDO QUE SE APOYE SOBRE UNA PARED CON LA CABEZA APOYADA SOBRE ALGO QUE LA MANTENGA DERECHA.

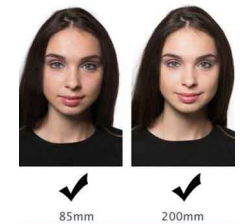

Caja de guantes (o similar) →

Para mantener al paciente en una buena posición colocar una caja de guantes (o similar) detrás de la cabeza contra la pared.

